


ELECTRODO INFANTE MINDRAY MR61

MINDRAY MR61 INFANT ELECTRODE

SKU: 252303552028

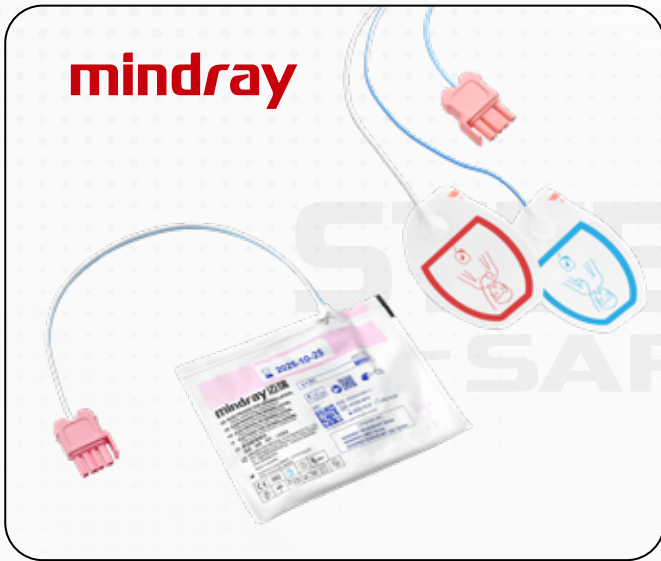

DESCRIPCIÓN

Los electrodos de desfibrilación multifunción MR61 son electrodos autoadhesivos pregelificados diseñados para monitorización del ECG, estimulación no invasiva, desfibrilación manual y cardioversión sincronizada para pacientes con un peso inferior a 25 kg. Este producto sólo debe ser utilizado por profesionales clínicos cualificados y con desfibriladores/monitores específicos de Mindray.

CARACTERÍSTICAS

Los electrodos permiten una desfibrilación segura con una energía máxima de hasta 100 J. Deben mantenerse en su envase original hasta su uso, verificando su integridad, el estado del gel y la fecha de caducidad, contando con una vida útil de 3 años. Son de uso único para un solo paciente y deben reemplazarse tras 1 hora de estimulación continua, 25 descargas o cada 8 horas. No deben limpiarse, esterilizarse, sumergirse en líquidos ni aplicarse sobre piel dañada, garantizando un uso seguro y confiable. Incorporan un cable con una longitud de 120 cm.

DESCRIPTION

The MR61 multifunction defibrillation electrodes are pre-gelled, self-adhesive electrodes designed for ECG monitoring, non-invasive pacing, manual defibrillation, and synchronized cardioversion in patients weighing less than 25 kg. This product must be used only by qualified clinical professionals and with specific Mindray defibrillators/monitors.

CHARACTERISTICS

The electrodes allow safe defibrillation with a maximum energy of up to 100 J. They must be kept in their original packaging until use, checking package integrity, gel condition, and expiration date, with a service life of 3 years. They are for single-patient, single-use only and must be replaced after 1 hour of continuous stimulation, 25 shocks, or every 8 hours. They must not be cleaned, sterilized, immersed in liquids, or applied to damaged skin, ensuring safe and reliable use. They incorporate a cable with a length of 120 cm.

INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa 1 unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag 1 unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (Kg)/ Weight (Kg)
Producto / Product	19	15	2	0,105
Caja máster / Master box	19	15	2	0,105

CERTIFICACIONES / APPROVALS



Cumple los requisitos de la Directiva 93/42/CEE del Consejo.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Están diseñados para su uso exclusivo con equipos compatibles Mindray. Especiales para hospitales, colegios, ambulancias y cualquier entorno que atienda pacientes pediátricos con riesgo cardíaco.

USES

They are designed for exclusive use with compatible Mindray equipment. Ideal for hospitals, schools, ambulances, and any environment that provides care for pediatric patients at cardiac risk.

PRECAUCIONES

Antes de su uso, verifique la integridad del envase, el estado del gel y la fecha de caducidad. No aplaste, doble ni pliegue los electrodos, ni los utilice si presentan daños, contaminación o gel seco. No abra el paquete hasta su aplicación, no aplique gel adicional, no los limpie, esterilice ni sumerja en líquidos.

RESISTANCES

Before use, check the integrity of the packaging, the condition of the gel, and the expiration date. Do not crush, bend, or fold the electrodes, and do not use them if they show any damage, contamination, or dried gel. Do not open the package until application, do not apply additional gel, and do not clean, sterilize, or immerse them in liquids.

